

OPTIMA™

Кресло-кровать акушерская Lojer Merivaara



LOJER®

For Easy
Care



OPTIMA™



Основные характеристики:

1. Возможность расположения роженицы в разных положениях
2. Удобный доступ для акушерки
3. Предназначено для всех этапов родов

Акушерское кресло-кровать Optima является безопасным и эргономичным решением для проведения безопасных родов, оказания помощи роженице на разных этапах. Обновленная модель Optima создавалась с учетом пожеланий ведущих европейских специалистов в области акушерства. Мы придали особенно значение эргономике, мобильности и безопасности как для будущей матери, так и для персонала.

Уникальное кресло - кровать Optima позволяет использовать многочисленные позиции для комфортного расположения роженицы, обеспечив, при этом, легкий доступ к ней акушерки. Кровать имеет электрический или ручной наклон Тренделенбург, ручной привод экстренного опускания спинной секции. Каркас окрашен антибактериальной краской, структура кровати позволяет легко проводить чистку, значительно повышая уровень гигиены. Кровать Optima может использоваться и для транспортировки пациентки в ЛПУ.



Наклон ножной секции позволяет варьировать положения роженицы ножная секция может задвигаться под ложе.



Ультра-легкая ножная секция может быть расположена под ложем вместе с матрасом, делая позиционирование персонала более эргономичным. Ножная секция регулируется по высоте и имеет безопасную рабочую нагрузку 80 кг.



Большая емкость из нержавеющей стали может быть расположена под ножной секцией и выдвинута при необходимости.



Подколенники и опорная перекладина могут быть присоединены к сиденью посредством уникального зажима или к ножной секции.



Электрический или ручной привод Тренделенбурга.



Новые боковые ограждения - стильные и гигиеничные.

ПРИМЕРЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ



Позиция сидя

Преимущества:

- Эффективное удобное положение для потуг
- Способствует более легкому течению родов за счет силы притяжения и раскрытия таза

Optima предлагает:

- Удобные широкие опоры для ног
- Поручни для более эффективных потуг
- Широкий диапазон регулировок ножной секции для облегчения родов и обеспечения удобного положения акушерки



Вертикальная позиция с опорой на дугу для роженицы

Преимущества:

- Способствует более легкому течению родов за счет силы притяжения и раскрытия таза
- Расслабление тазовой области облегчает процесс родов для матери
- Также может использоваться в сочетании с гимнастическим мячом

Optima предлагает:

- Дуга для роженицы для опоры на руки
- Выдвижная ножная секция, обеспечивающая дополнительное пространство
- Дуга для роженицы также может использоваться в положении стоя



ПРИМЕРЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ РОДАХ

Позиция на боку



Преимущества:

- Позволяет расслабиться между схватками и потугами
- Сокращает давление в перинеальной области и увеличивает приток крови в зону нахождения плода
- Эргономичное положение для женщин любого роста и веса

Optima предлагает:

- Широкий диапазон регулировки опоры для ног
- Запатентованный удобный механизм зажимов



Позиция на корточках



Преимущества:

- Снижает давление на диафрагму и улучшает кровоснабжение сокращающихся мышц
- Позволяет легко найти удобное положение таза

Optima предлагает:

- Широкий диапазон регулировок тазовой и спинной секций
- Задвигающаяся ножная секция создает дополнительное свободное пространство возле пациентки и кровати

Аксессуары



Подколенники, пара
A23553



Опоры для ног
A42559000



Инфузионная стойка
4 крючка 100000499



Дуга для активации
A41884100



Опорная дуга для
рожицы
A42749500



Боковые ограждения
A42200100



Боковые ограждения
A42718200



Опора для руки
100000127



Наклоняемый торец
A41935200



Торец стандартный
100009890



Стенд для монитора
128009769




Рельс для принадлежностей
100000701



Корзина для хранения матрасов
100033974



Корзина для журналов
128009784

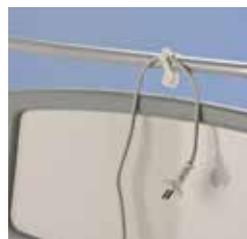

Держатель кабеля
A41987307



Ножная педаль
A42471800



Панель управления для пациента и ночная подсветка A43192000 (без лампы для чтения)



Пульт управления для персонала АСО A42471700 с возможностью блокировки функций.

Технические характеристики	
Общая ширина	1000 мм.
Ширина ложа	780 мм.
Общая длина	1650 - 2210 мм.
Длина ложа	1300 - 2210 мм.
Регулировка высоты	580 - 955 мм.
Максимальный вес пациента	190 кг.
Безопасная рабочая нагрузка	230 кг.
Тренделенбург	12°
Регулировка спинной секции	0 - 75°
Регулировка высоты ножной секции	0 - 250 мм.
Колеса	С центральной блокировкой, диаметр 150 мм.
Ручной пульт управления	Да
Вес	165 кг.
Страна производства	Финляндия
Сертификат CE	Да
Гарантия	2 года

Другие характеристики:

- Центральная блокировка колес
- Емкость на 12 л.
- Выдвижная ножная секция с функцией наклона
- Рукоятки для потуг
- Зажимы
- Набор матрасов

